


**Zuverlässiger Partner für  
innovative Reinigung,  
Desinfektion und Sterilisation**


# Belimed Portfolio

Das richtige Angebot für eine professionelle AEMP

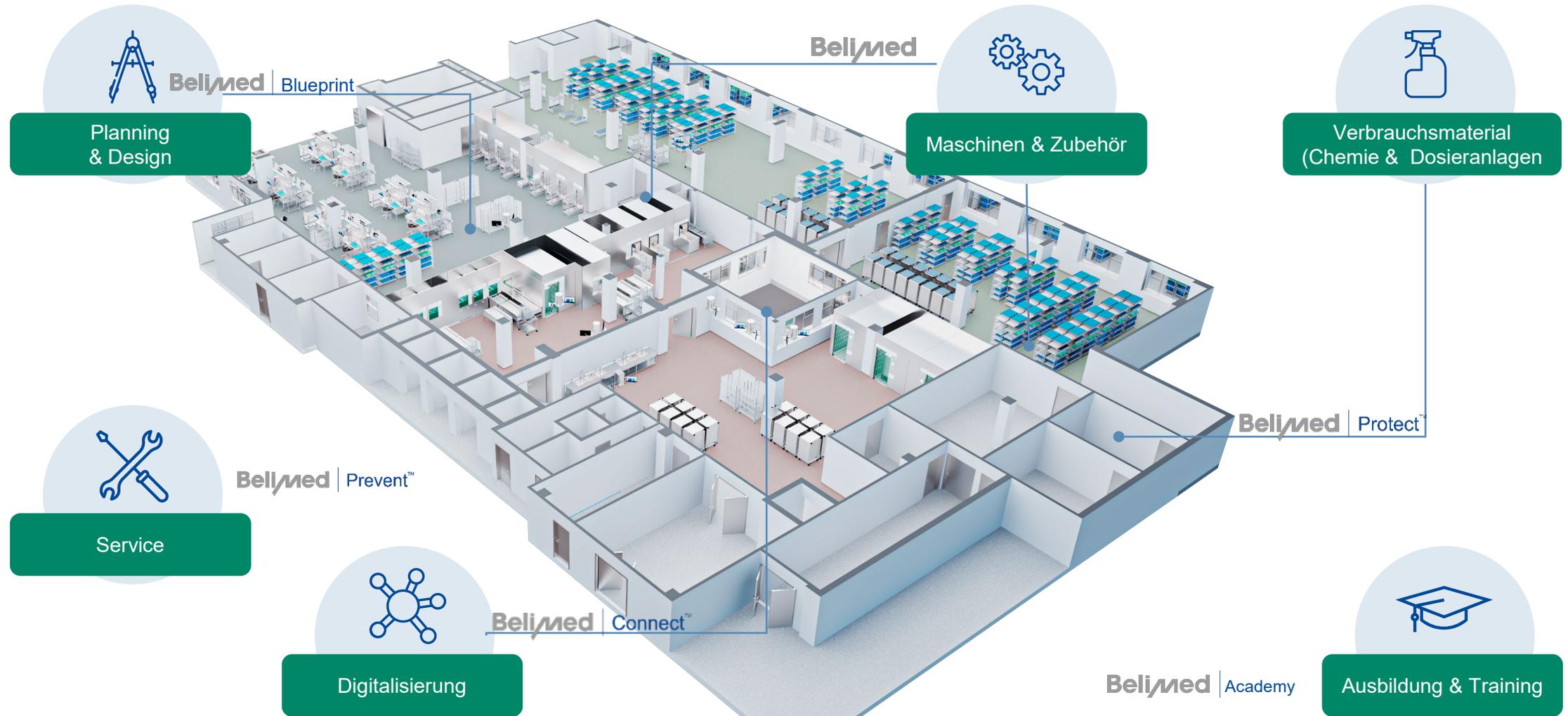

# Belimed Portfolio

Das richtige Angebot für eine professionelle AEMP

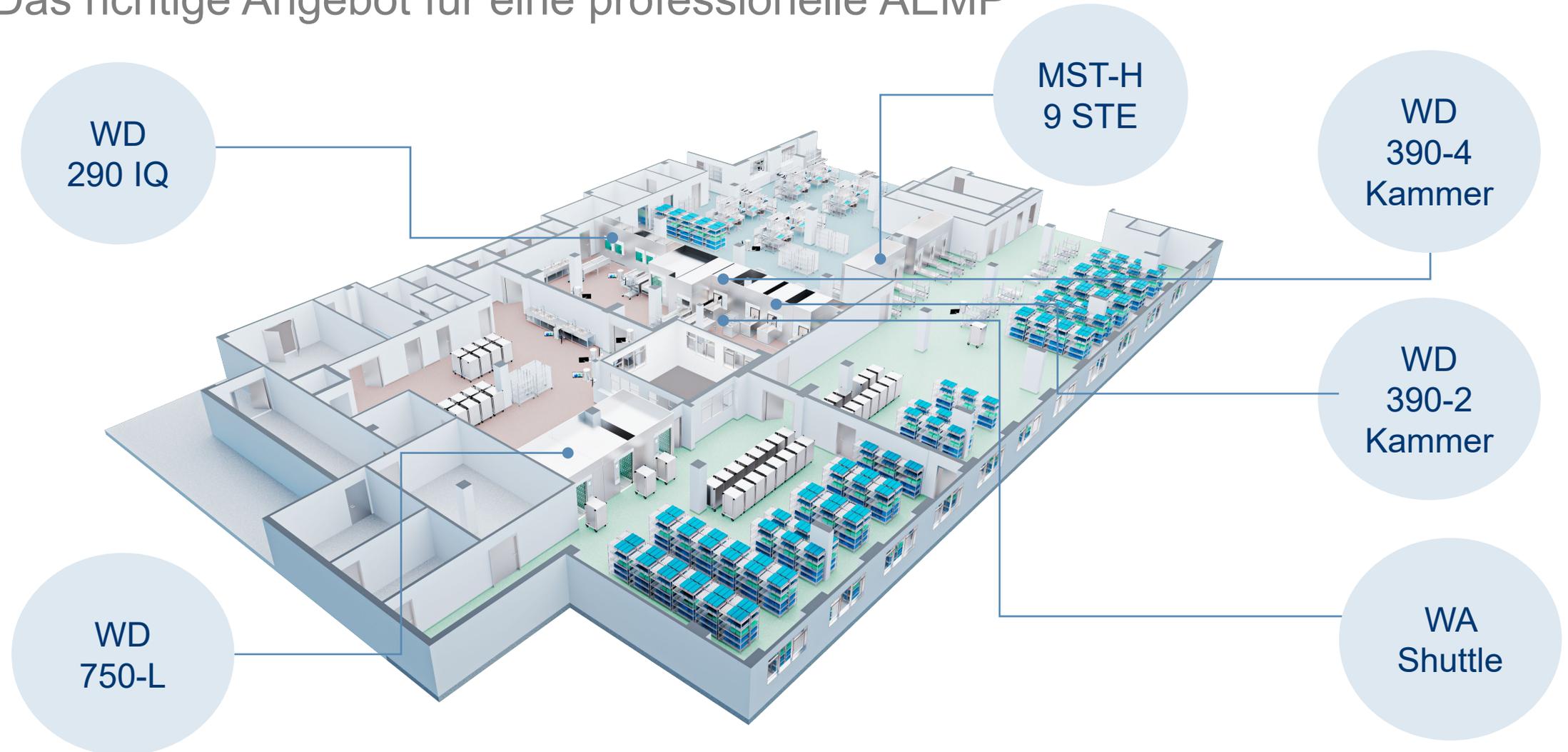

# Automatisierung

## 5x WD290IQ-Shuttlesystem



# WD 290 IQ


## Einkammer- Reinigungs- Desinfektions- und Trocknungsanlage



Elektrisch oder komplett Dampfbeheizt  
Elektrisch/ Dampf umschaltbar  
Kompatibel zu automatischen Be-Entladungssystemen



Shuttlesystem  
AMR – Autonomer Mobiler Roboter  
Beladungsträger zu Einkammer-RDG

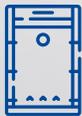

Geschweißte Kammerverbindungen



Jederzeit zugänglicher Wartungsbereich



36 - 75 Instrumenten- Siebe/ Stunde

WD 290 RDG  
nach EN  
**ISO**  
**15883-1/2**

Automatischer  
Ein/  
Austransport  
(SISO)



# Automatisierung

## 3x WD390-2-Kammer - Shuttlesystem



# WD 390 Mehrkammer


## Reinigungs- Desinfektions- und Trocknungsanlage



1 - 3 Reinigungs- / Desinfektionsmodule  
1 - 2 Trocknungsmodul



Transport System mit automatischer Be- und Entladung für je 1  
- 3 Stellplätze  
Kompatible Beladungsträger zu Einkammer-RDG

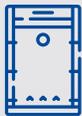

Geschweißte Kammerverbindungen



Jederzeit zugänglicher Wartungsbereich



36 - 75 Instrumenten- Siebe/ Stunde

**WD 390**  
2- 4 Kammer  
RDG

WD 390 RDG  
nach EN  
**ISO**  
**15883-1/2**



# WD 390 3-Kammeranlage

## Prinzip der Taktreinigungsanlage WD 390 – 3 K

- Übersichtliche Anordnung der Maschinenteile und sehr gute Zugänglichkeit
- Hochwertigste Industriekomponenten
- Isolierung von Kammer, Tanks und Rohrleitungen mit Armaflex
- Professionelle Kabelverlegung
- Rohrleitungen aus Edelstahl mit Gefälle für Selbstentleerung verlegt
- Regelbare Leistung der Edelstahlwaschpumpen
- Pneumatische Stellantriebe



# Großraum-RDG

3x WD750-L



# WD 750 Großraum-RDG


für Sterilcontainer, Instrumente, Utensilien  
und Transportwagen



Für Medizinprodukte der Klasse IIa  
(z.B. Sterilcontainer, Chirurgische Instrumente)



Reinigung von Nicht-Medizinprodukten (z.B. Transportwagen,  
OP-Tische, OP-Schuhe)

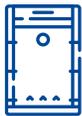

Vor Ort geschweißte Kammerkonstruktion  
Patentierter, leckagefreier Anschlusskupplung für  
Beladungsträger mit Innenreinigung



Mit automatischen Glasschiebetüren



Bodenebene Beladung, bei Grubentiefe 150mm

Verfügbar in 3  
Kammergrößen,  
Längen von  
**1350, 2300  
und 2950mm**

WD 750 RDG  
nach EN  
**ISO  
15883-1/2**



# WD 750 Großraum-RDG

für Sterilcontainer, Instrumente, Utensilien und Transportwagen

- Leckagefreie Versorgung des Beladungsträgers durch patentierte, pneumatische Anschlusskupplung
- Sehr hohe Waschleistung durch starke Umwälzpumpe mit einem Fördervolumen von 1000 Liter/ min
- Validierte Aufbereitung von Instrumenten



# Sterilisation

6x MST-H



# Sterilisation

6x MST-H – automatische Entladung



# MST-H

## Dampfsterilisator mit horizontaler Tür



### Hohe Flexibilität und maximaler Durchsatz

Kapazität von 9 bis 18 StE, grosser Serviceraum, verschiedene Optionen.



### Einfaches, zeitsparendes Handling

Automatische Start- und Standby-Funktion und integrierter Bowie-Dick test ermöglicht ein Durchlaufen der Testprogramme bereits vor Arbeitsbeginn.



### Sparsamer Umgang mit Ressourcen

Integriertes Wassersparsystem mit hocheffizienter Vakuumpumpe, optionaler Anschluss an den Kühlkreislauf reduziert den Wasserverbrauch um zusätzlich 95%.



### Flexibilität in der Prozesskette

Kooperationen mit Logistikpartnern wie Hupfer.



### Nahtlose Konnektivität

Digital vernetzbar mittels SmartHub, übersichtliche Status-Darstellung auf Dashboard



# MST-H Dampfsterilisator mit horizontaler Tür

Schiebetüren 9 – 18 StE mit  
neuem Be- und  
Entladesystem




Unit ID	Status	Time	Unit ID	Status	Time
WD-01	Green	00:26	WD-09	Green	00:00
WD-02	Green	00:56	WD-10	Green	00:58
WD-03	Green	00:38	WD-11	Green	00:00
WD-04	Green	01:01	WD-12	Green	00:11
WD-05	Green	00:02	WD-13	Green	00:32
WD-06	Green	00:59	WD-14	Green	00:00
WD-07	Green	00:47	WD-15	Green	00:17
WD-08	Green	00:24			

# Belimed Connect die intelligente AEMP



# Dokumentation SmartHUB Dashboard

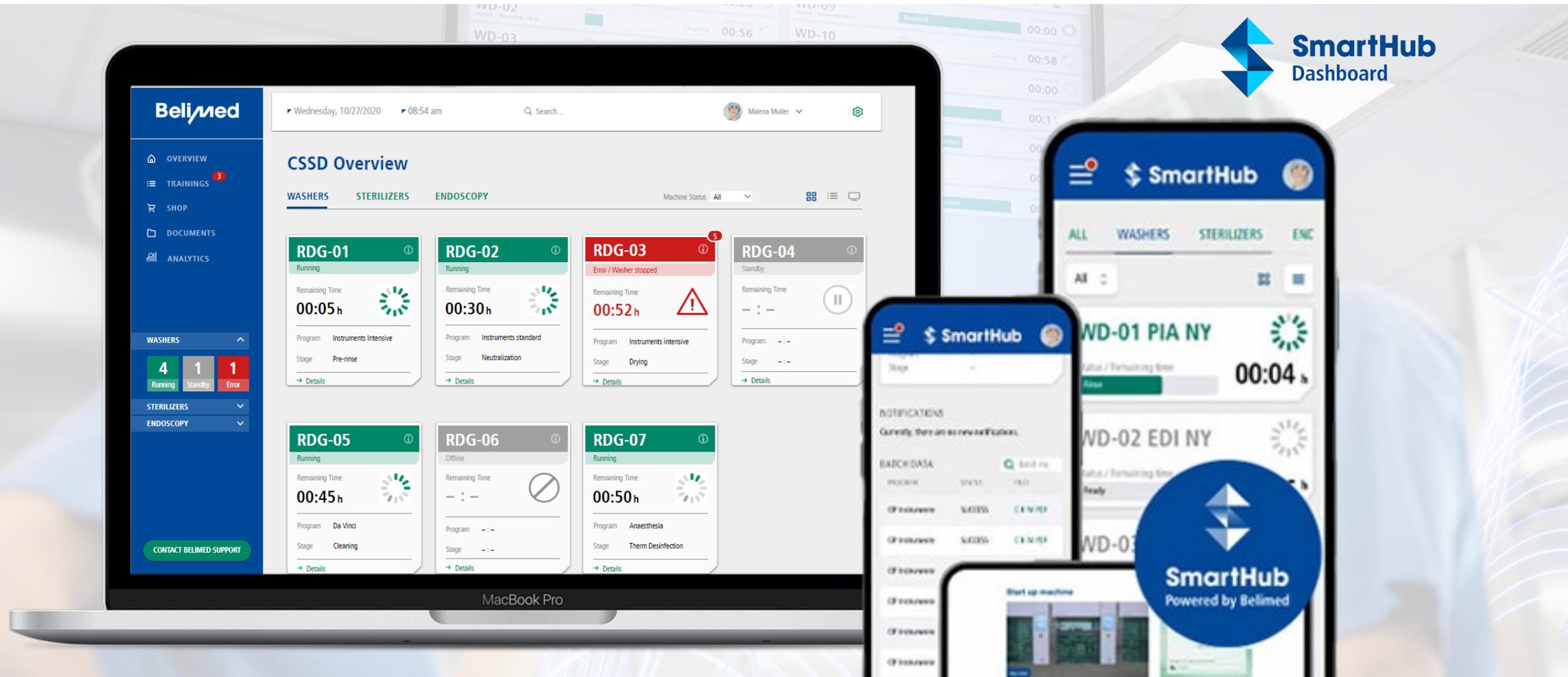

# Dokumentation SmartHUB

## Anzeigedetails Dashboard



Bestimmen Sie Ihren eigenen Gerätenamen mit bis zu 12 Zeichen.

Programmfortschritt und Fehlererkennung

**MST-V-04**

201169 Belimed MST-V

Status

Finished

Time Remaining

00:00



Geräte-Kennziffer


Gerätetyp

Programmstatus

Verbleibende Zeit

# SmartHub Orbit


## Leistungsversprechen

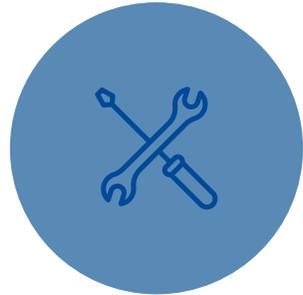

**Keine  
Stillstandzeiten**  
Hilfe bei Fehlerbehebung




**Papierlos arbeiten**  
Dokumentation

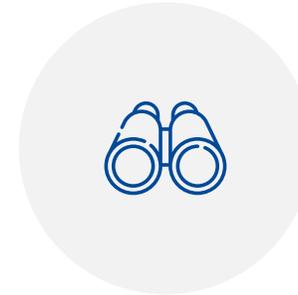

**Ferndiagnose**  
Operational Excellence




**Analyse**

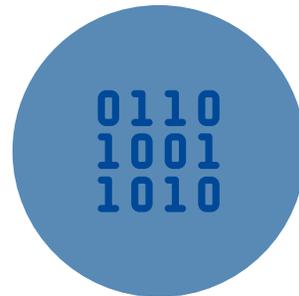


**Informationen rund  
um die Uhr**  
Einen Klick entfernt



**Weiterbildung  
E-Learning**

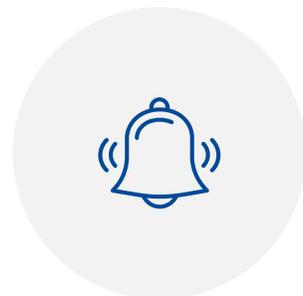

**Alarmer und  
Benachrichtigungen**

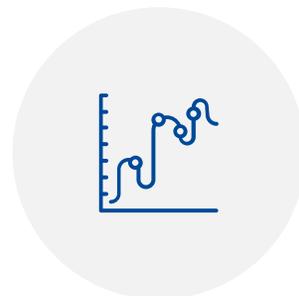

**Vorausschauende  
Analyse**



**Batch-Management**  
CSV, PDF

Teil des MVP

Unit ID	Status	Time	Unit ID	Status	Time
WD-01	Fertig	00:26	WD-09	Fertig	00:00
WD-02	Fertig	00:36	WD-10	Fertig	00:58
WD-03	Fertig	00:38	WD-11	Fertig	00:00
WD-04	Fertig	01:01	WD-12	Stopp	00:11
WD-05	Fertig	00:02	WD-13	Stopp	00:32
WD-06	Fertig	00:59	WD-14	Fertig	00:00
WD-07	Fertig	00:47	WD-15	Fertig	00:17
WD-08	Fertig	00:24			

# Belimed Service/ Wartung



# Karte B-DE Übersicht mit Techniker

## Kundenservice-Struktur Belimed Deutschland

Kundenorientiertes Servicenetz für  
schnellstmögliche Reaktionszeiten




**ca. 80**  
Servicetechniker



**3**  
Kundenbetreuer Service



**2**  
Serviceleiter

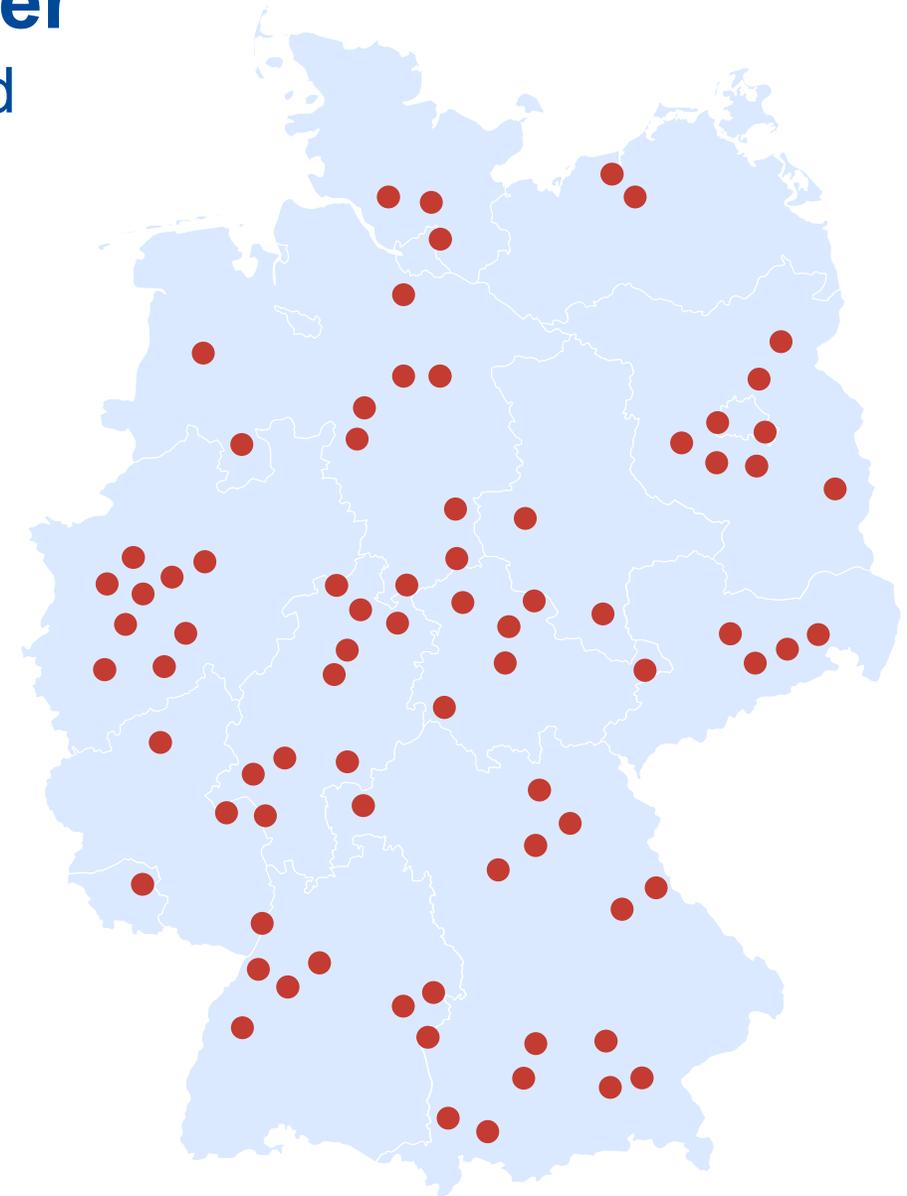

# Schulung

Fachmännische Anleitung - Schritt für Schritt zum Erfolg

In der **Belimed Trainings Academy** erleben  
Sie die Maschinen hautnah

**Trainings für  
Haustechniker**  
sowie für das Belimed  
Serviceteam

**Zertifizierung**

Gerne schulen wir  
**Sie auch vor  
Ort**



Room ID	Status	Time	Room ID	Status	Time
WD-01	Bereit	00:26	WD-09	In Arbeit	00:00
WD-02	In Arbeit	00:56	WD-10	Bereit	00:58
WD-03	Bereit	00:38	WD-11	In Arbeit	00:00
WD-04	In Arbeit	01:01	WD-12	Bereit	00:11
WD-05	Bereit	00:03	WD-13	In Arbeit	00:32
WD-06	In Arbeit	00:59	WD-14	Bereit	00:00
WD-07	In Arbeit	00:47	WD-15	In Arbeit	00:17
WD-08	Bereit	00:24			

**Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit**

